

O'Yeet US

Розроблено Pasadena, CA

Виробник: "Аукі Інтернешенел Лтд" (Aukey International Limited), № 102, будинок P09, південне місто Китаю, місто Пінху, район Лунган, Шеньчжень, Гуандун, КНР.
Імпортёр вказаний на упаковці.



@oyeetgo

Зроблено в КНР

NEX Pro II

Перкусійний ручний масажер для тіла
Deep Tissue Massager

Посібник користувача

O'Yeet

БЕЗПЕКА НА ПЕРШОМУ МІСЦІ

ЗБЕРЕЖІТЬ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ

Ми прагнемо зробити NEX Pro II максимально безпечним. Це сучасний механічний інструмент з електричними компонентами. Якщо NEX Pro II та аксесуари до нього використовуються або обслуговуються неналежним чином, існує ризик виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травми. При використанні NEX Pro II завжди слід дотримуватися цих основних запобіжних заходів:

ВИКОРИСТОВУВАТИ ТІЛЬКИ ЗА ІНСТРУКЦІЄЮ.

Використовуйте NEX Pro II, як описано в цьому посібнику. Використовуйте лише рекомендовані NEX аксесуари та запасні частини. Не робіть ніякого технічного обслуговування, окрім рекомендованого NEX Pro II.

НЕ ДЛЯ ДІТЕЙ.

NEX Pro II та зарядний пристрій не призначені для використання маленькими дітьми або особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами, які не мають достатнього досвіду та знань, за винятком випадків, коли вони користуються пристроєм під наглядом або за вказівкою відповідальної особи. Не дозволяйте вико-ристовувати NEX Pro II як іграшку. Під час використання пристрою дітьми або поблизу них необхідно бути особливо уважними. Слід наглядати за дітьми, щоб вони не гралися з NEX Pro II або зарядним пристроєм.

ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКУ ОТРИМАННЯ ТРАВМ.

Заряджайте NEX Pro II лише за допомогою зарядного кабелю OYeet NEX Pro II. Інший зарядний кабель може призвести до травм або пошкодження. Не підключайте NEX Pro II до розетки або автомобільного прикурювача. Внутрішній акумулятор буде остаточно виведено з ладу або пошкоджено.

МІСЦЯ ДЛЯ ПІДЗАРЯДКИ.

NEX Pro II слід заряджати в приміщенні з хорошою вентиляцією, в

сухому місці. Не заряджайте NEX Pro II на відкритому повітрі, у ванній кімнаті або на відстані менше 3,1 метра від ванни чи басейну. Не використовуйте NEX Pro II або зарядний пристрій на вологих поверхнях і не піддавайте зарядний пристрій впливу вологи, дощу або снігу. Не використовуйте NEX Pro II або зарядний пристрій у вибухонебезпечному середовищі (газоподібні пари, пил або легкозаймисті матеріали). Це може призвести до іскроутворення, що може спричинити пожежу.

ВІД'ЄДНАННЯ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЮ.

Тягніть за вилку, а не за шнур, щоб зменшити ризик пошкодження вилки та шнура. Тримайте шнур подалі від тепла, олії та гострих країв. Не використовуйте і не заряджайте пошкоджений шнур. Не розтягуйте шнур зарядного пристрою і не піддавайте його навантаженню. Тримайте шнур подалі від нагрітих поверхонь. Не торкайтеся зарядного кабелю або NEX Pro II мокрими руками. Від'єднуйте кабель зарядного пристрою, коли він не використовується. Від'єднуйте зарядний пристрій від розетки, якщо він не використовується протягом тривалого часу. Переконайтеся, що зарядний кабель розташований таким чином, щоб на нього не наступали, не перечіплялися, не піддавали його пошкодженню або навантаженню іншим чином. негайно замініть пошкоджений зарядний кабель.

НЕ ПЕРЕКРИВАЙТЕ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ ОТВОРИ ДВИГУНА.

Не встановлюйте жодних перешкод у вентиляційні отвори. Не використовуйте, якщо будь-який вентиляційний отвір заблоковано. Не допускайте потрапляння пилу, ворсу, волосся і всього, що може зменшити потік повітря. Не допускайте потрапляння волосся, вільного одягу і пальців в вентиляційні отвори та рухомі частини.

НЕ СПАЛЮЙТЕ NEX Pro II.

Батарея може вибухнути, спричинивши травми або смерть. При згорянні батареї утворюються токсичні пари та матеріали.

ВИЙТИ ЗА МЕЖІ СВОЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ

Ми розширюємо межі технологій для покращення відновлення та пересування в будь-який час і в будь-якому місці.

Потужний | Портативний | Професійний

НЕ ЗГИНАЙТЕ, НЕ КИДАЙТЕ І НЕ ПОШКОДЖУЙТЕ ЗАРЯДНИЙ КАБЕЛЬ NEX Pro II.

Не використовуйте зарядний пристрій, який отримав різкий удар, був упущений, перебитий або пошкоджений будь-яким чином. ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ БАТАРЕЇ ВИКЛИКАЮТЬ СЕРІОЗНІ ОПІКИ. Ніколи не допускайте контакту внутрішньої батареї зі шкірою, очима чи ротом. Якщо з пошкодженої батареї витікають хімікати, використовуйте гумові або неопренові рукавички, щоб утилізувати її. Якщо на шкіру потрапила рідина з акумулятора, промийте її водою з милом і сполосніть оцтом. Якщо в очі потрапили хімікати акумулятора, негайно промийте їх водою протягом 20 хвилин і зверніться до лікаря. Зняти та утилізувати забруднений одяг.

НЕ ВМИКАЙТЕ ПІД КОВДРОЮ ТА ПОДУШКОЮ.

Надмірне нагрівання може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або травми.

ЗБЕРІГАННЯ NEX Pro II.

Зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте NEX Pro II лише за температури навколишнього середовища від 0°C/32°F до +40°C/104°F. Не зберігайте NEX Pro II там, де температура може перевищувати +40° C/104°F, наприклад, під прямими сонячними променями, в автомобілі або металевій будівлі влітку.

НЕ РОЗБИРАТИ.

Розбирання або неправильне збирання може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або впливу хімічних речовин акумулятора. Гарантія буде анульована, якщо NEX Pro II або зарядний пристрій було розібрано або якщо будь-які деталі було знято.

ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Якщо NEX Pro II не працює належним чином, зазнав сильного удару, був упущений, пошкоджений, залишений на відкритому повітрі або впав у воду не використовуйте його і зверніться до сервісного центру для ремонту або обслуговування. Не намагайтеся самостійно ремонтувати або розбирати OYeet NEX Pro II, це може призвести до ураження електричним струмом або пожежі.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ПІД ЧАС КУПАННЯ, У ВАННІ АБО РАКОВИНІ.

Не кладіть NEX Pro II або зарядний пристрій у місця, де він може впасти у ванну або раковину. Не кладіть і не кидайте пристрій у воду або іншу рідину. Не тягніться до пристрою, який впав у воду. НЕГАЙНО та обережно витягніть пристрій, не торкаючись до нього шкірою.

ТЕПЛОВИЙ ОБМЕЖУВАЧ.

NEX Pro II має термообмежувач з автоматичним скиданням, який вимикає NEX Pro II для запобігання перегріву та пожежі.

УМОВИ ВСТАНОВЛЕННЯ ВИРОБУ.

Температура: +5°C~+40°C.


Відносна вологість: < 90%.

Атмосферний тиск: 70кПа~106кПа.

ОСОБЛИВОСТІ ВИРОБУ OYeet NEX Pro II

Модель:	MG-T1
Частота:	4 налаштування швидкості + автоматичне регулювання швидкості, 1800-3500 ударів/хв
Глибина удару:	10мм
Макс. сила поштовху:	~27кг / 60 фунтів
Літій-іонний акумулятор:	10.95В 2.6A/год
Зарядний кабель:	Type-C 5В === 2A
Безперервний робочий час:	> 6 години при нормальному навантаженні > 2 години при високому навантаженні
Двигун:	3 фази, 10 полюсів з 3 датчиками, задні магніти заземлення


КОМПЛЕКТАЦІЯ

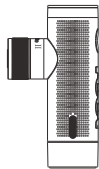

NEX Pro II



Підставка
для
зарядки

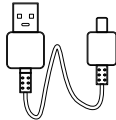


Зарядний кабель
Type-C



Дорожній
футляр




Ремінець
для
футляра

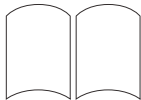


Посібник
користувача




Вигнута насадка

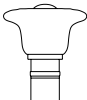


Пласка металева
насадка

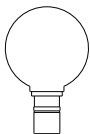


Кульова насадка

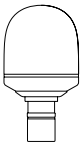

М'яка кульова
насадка

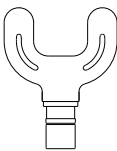


Вилка

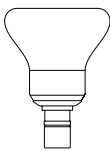

Трикутна
насадка



Насадка для
тригерних точок

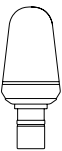

Конусна
насадка

ЗНАЙОМСТВО З OYeet NEX NEX Pro II

Змінне кріплення


Ручка

Вбудований акумулятор NEX
18650x3

Вимикач живлення УВІМК/ВИМК
4 налаштування швидкості + автоматичне регулювання швидкості


Індикатор датчика тиску
(Світлодіодне кільце)

Зарядний порт

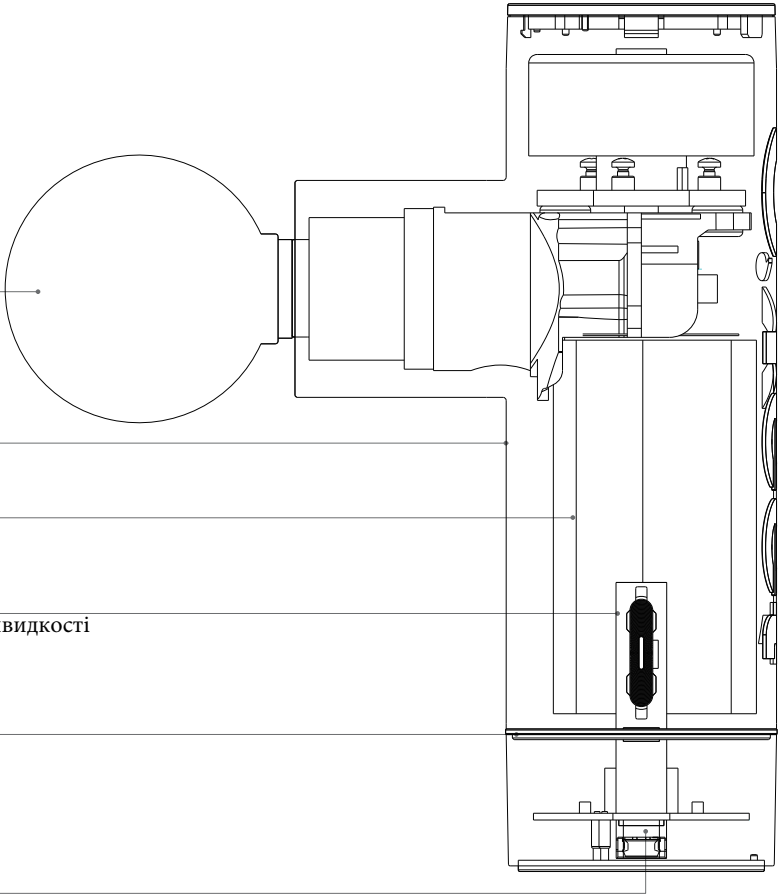

ВИКОРИСТАННЯ OYeeT NEX Pro II


1. Щоб увімкнути NEX Pro II, коротко натисніть і утримуйте перемикач живлення УВІМК/ВИМК.
2. Натисніть перемикач живлення УВІМК/ВИМК, щоб збільшити, зменшити швидкість або увімкнути режим автоматичного регулювання швидкості ударів.
NEX Pro II має 4 налаштування швидкості та режим автоматичного регулювання швидкості, який забезпечує від 1800 до 3500 ударів на хвилину.
* Світлодіодний індикатор почне блимати, коли увімкнено режим автоматичного регулювання швидкості.
3. Для зчитування показників датчика тиску: Світлодіодне кільце показує рівень тиску
Зелений: 0~6.6 фунтів (0~3кг)
Помаранчевий: 6.6~13 футів (3кг~6кг)
Червоний: > 13 футів (> 6кг)
4. Щоб вимкнути NEX Pro II, міцно натисніть і утримуйте кнопку живлення УВІМК/ВИМК, доки пристрій не вимкнеться.
- ПРИМІТКА.** Перед першим використанням повністю зарядіть NEX Pro II протягом 6 годин.

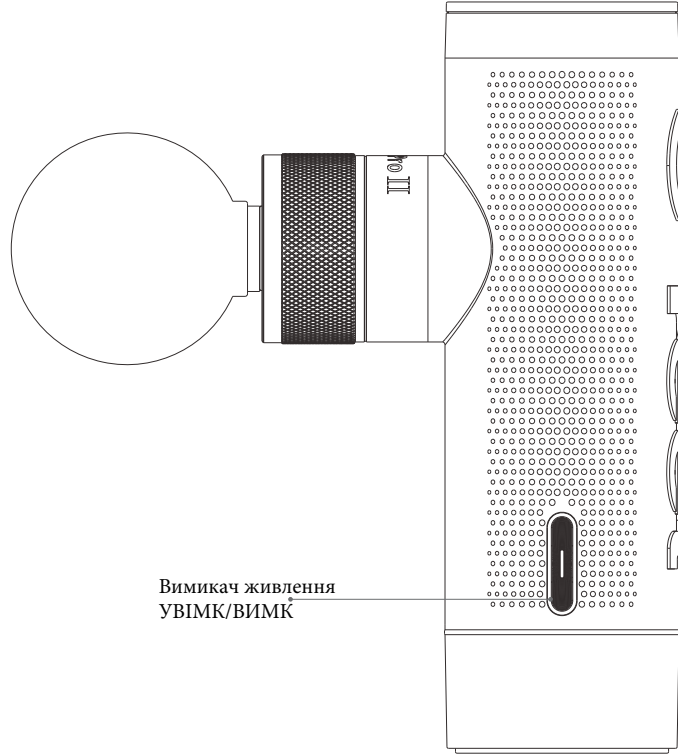

ПРИЄДНАННЯ НАСАДОК

- Вирівняйте насадку з накінецьником ручки та натисніть, щоб з'єднати.
- Щоб зняти, візьміться за насадку, поклавши пальці з кожного боку пластикового з'єднувача.
- Зніміть насадку.

⚠ Для насадки "Вилка" вирівняйте лінію на насадці та натисніть, щоб з'єднати.

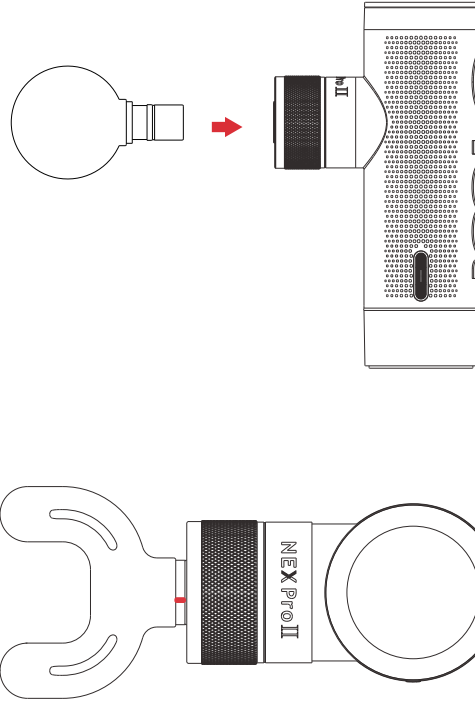

ЗАРЯДЖАННЯ OYeeT NEX Pro II

ЗАРЯДЖАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАРЯДНОГО КАБЕЛЮ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ.


NEX Pro II можна заряджати безпосередньо за допомогою зарядного кабелю постійного струму. Просто підключіть кабель до зарядного порту та увімкніть пристрій у розетку. Світлодіодний індикатор вимикача живлення NEX Pro II вимкнеться, а світлодіодне кільце почне блимати при правильному підключенні, а при повному заряді залишиться світитися.

ЗАРЯДЖАННЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАРЯДНОЇ ПІДСТАВКИ.

Підключіть зарядний кабель TYPE-C до бездротової зарядної підставки та увімкніть її в мережу, просто вставте NEX Pro II у підставку, і він почне заряджатися. Світлодіодний індикатор вимикача живлення NEX Pro II вимкнеться, а світлодіодне кільце почне блимати при правильному підключенні, а при повному заряді залишиться світитися.

АКУМУЛЯТОР.

Зелений - 50% +
Помаранчевий - 25~50%
Червоний - 5~25%
Блимає червоний індикатор - < 5%, пристрій буде вимкнено.
Зарядіть пристрій якомога швидше.

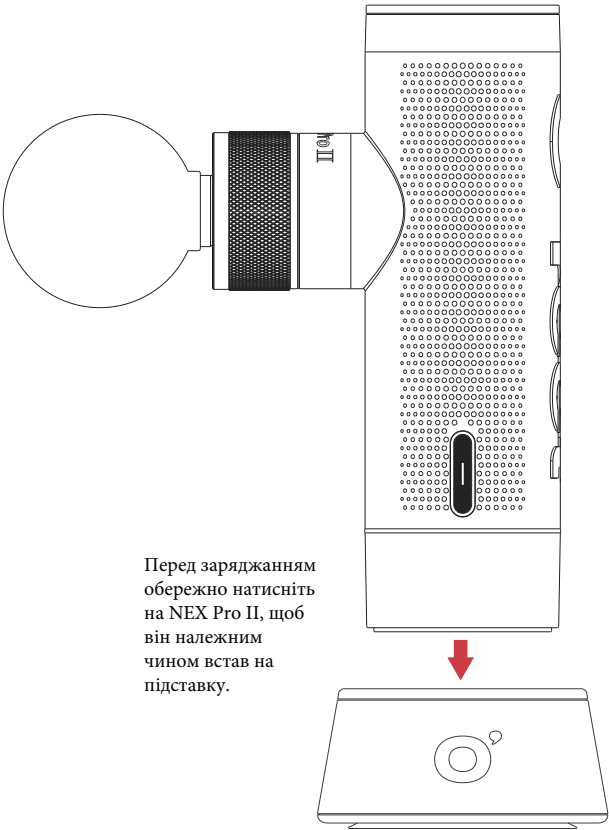


НАСАДКИ

Набір насадок NEX Pro II містить 8 насадок, призначених для конкретних процедур.


Пласка металева насадка

Чудово підходить для роботи з дуже щільними групами м'язів. Ідеально підходить при важких тренуваннях.

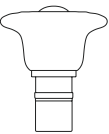


Трикутна насадка

Ідеально підходить для іліотібіального тракта, лопаток і зазвичай використовується для «шкрябання» та «почервоніння», допомагаючи зменшити кількість молочної кислоти в м'язах.

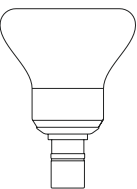


Вигнута насадка

Імітація постукування імітує масаж руками з рівномірною інтенсивністю, наприклад, руки, стегна та інші вигнуті частини.

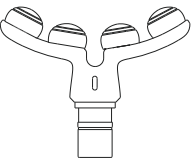


Вилка

Закруглені кінці для опрацювання певних груп м'язів.

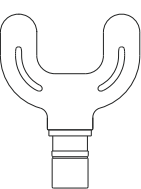


М'яка кульова насадка

Більша площа поверхні, найкраще кріплення для початку, щоб зменшити больові точки.

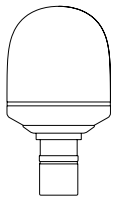


Конусна насадка

Визначте проблемні зони та звільніть тригерні точки.

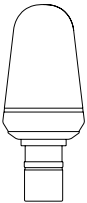


Кульова насадка

Ідеально підходить для загального використання для звуження больових точок.

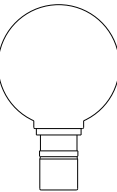

Насадка для тригерних точок

Зазвичай використовується для точкового розминання м'язів, у тому числі рук і ніг.

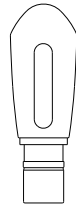

Інформація про утилізацію та переробку відходів електронного та електричного обладнання. Усі вироби з цим символом в подальшому будуть вважатися відпрацьованим електричним та електронним обладнанням, яке не слід змішувати з несорттованими побутовими відходами. Натомість, ви повинні захищати здоров'я людей та навколишнє середовище, передаючи своє відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевою владою.

Юридичні примітки. Весь наведений вище вміст не містить жодних заяв про лікування. Для діагностики та лікування захворювання необхідна допомога лікаря або терапевта. OУеет не обіцяє, що продукт має якийсь лікувальний ефект.

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №

Щиро вітаємо Вас з приємною покупкою та впевнені, що придбане обладнання задовольнить усі Ваші побажання.

РОЗДІЛ 1: ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний гарантійний талон підтверджує якість продукції та надає право на гарантійний ремонт та заміну дефектних компонентів. Всі умови гарантії мають дію у межах законодавства про захист прав споживачів та регулюються законодавством України. Технічне обслуговування обладнання не входить до переліку робіт, що виконуються в межах гарантійних зобов'язань. Компанія залишає за собою право відмовитися від гарантійного ремонту у випадку недотримання нижчезазначених умов гарантії.

РОЗДІЛ 2: УМОВИ ГАРАНТІЇ

Гарантія дійсна за умови наявності правильно заповненого гарантійного талону з зазначенням повної назви моделі, серійного номера виробу, дати продажу, гарантійного строку, чітких печаток фірми – продавця, а також повної інформації про компанію інстальатора з зазначенням ПІБ спеціаліста відповідального за проведення монтажних робіт, заповненого протоколу пуску та акту готовності обладнання до пусконаладжувальних робіт. Перед використанням даного обладнання рекомендуємо Вам ознайомитися з інструкцією по експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо заводське маркування або серійний номер пошкоджені, нерозбірливі, мають сліди переклеювання або відсутні на обладнанні.

Гарантія не розповсюджується у випадку порушення правил транспортування та зберігання обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку використання обладнання не за призначенням.

Гарантія не розповсюджується у випадку внесення в конструкцію обладнання змін або виконання доробок, а також використання деталей, комплектуючих, програмного забезпечення, витратних матеріалів, засобів для чищення матеріалів не передбачених нормативними документами.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання споживачем або третьою стороною.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо несправність обладнання викликана дією непереборних сил (пожежа, удар блискавки, затоплення, природні катаклізми і т.д.).

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо пошкодження обладнання викликане невідповідністю Державним стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж, ненормованими коливаннями напруги та іншими несправностями ліній електроживлення, що призводить до характерних пошкоджень ланцюгів живлення, компонентів, контактів і компресорів.

Гарантія не розповсюджується, якщо обладнання експлуатується з порушенням умов використання, які вказані в інструкції з експлуатації.

Гарантія не розповсюджується у випадку, якщо є сліди стороннього втручання або була спроба несанкціонованого ремонту обладнання.

Гарантія не розповсюджується у випадку пошкодження обладнання заподіяного попаданням всередину виробу сторонніх предметів, хімічних засобів, рідини, пилу, комах, тощо.

УВАГА! Гарантія дійсна за умови проведення сервісного обслуговування в сервісних центрах «ЦИТРУС». Адреси сервісних центрів «ЦИТРУС» зазначені за посиланням <https://service.ctrс.com.ua/>

ВІДМІТКИ ПРО ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ				
№ПП	Дата	Організація, Адреса	Представник	Підпис, МП
1.				
2.				
3.				