

Інструкції з техніки безпеки

Попередження
Заборои

- Забороняється використовувати пристрій на ділянках з меншим м'язовим покриттям, таких як голова, обличчя, лікті, коліна та інші суглоби з мінімальним захистом м'язів.
- Забороно використовувати на щільних нервах і кровосносних судинах і вразливих ділянках, таких як пахви, внутрішня сторона рук, внутрішня сторона ключиць, внутрішня сторона ліктьових суглобів, задня сторона колінних ямок і геніталії.
- Забороно використовувати на ділянках із синцями, болям у тілі, поверхневими ранами, місцевим підвищенням температури, почервонінням, дискомфортом, гострим запаленням, спазмами, розривами м'язів, гострим розтягненнями, синцями та розтягненнями.
- Якщо після інтенсивних тренувань виникають такі симптоми, як загальна лихоманка, нудота, блювота, м'язовий біль і слабкість, негайно припиніть використання та зверніться до лікаря.
- Забороно використовувати виріб у вологому середовищі та не занурюйте його у воду чи інші рідини. Тримайте його подалі від джерел води, крові, порушення згортання крові, тромбоцитопенічна пурпура, пляшки на шиї, варикозне розширення вен, венозний тромбоз, рак, пухлики та психічні розлади.
- Забороно використання під час водіння.
- Забороно використання за несприятливих погодних умов, таких як дощ, сніг, грози, ліщані бурі, тайфуни тощо.
- Забороно використання в закритих приміщеннях з високою концентрацією газу (наприклад, дезінфікуючі засоби, кисневі камери високого тиску тощо).
- Цей продукт може допомогти зняти стрес, втому та біль у м'язах, але не може замінити професійне медичне обладнання, не має ефекту зниження ваги, не може вилікувати будь-які хвороби та не може вирішити медичні проблеми.

Жодні претензії не розглядатимуться щодо нещасних випадків, спричинених неправильним використанням.

Застереження
Запобіжні заходи

- Не підключайте виріб до джерела живлення для зарядки, якщо він знаходиться без нагляду або використовується. Після завершення зарядки вчасно від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.
- Не використовуйте цей виріб під покриттям (наприклад, ковдрами, подушками тощо). Це може вплинути на розсіювання тепла продукту та спричинити його перегрів, що призведе до пошкодження, короткого замикання, пожежі, ураження електричним струмом та інших небезпечних травм.
- Не вставляйте та не блокуйте зарядний порт або відкриті отвори будь-якими предметами, оскільки це може призвести до неправильного використання або пошкодження виробу. Тримайте пристрій в чистоті.
- Не використовуйте виріб у вологому середовищі та не занурюйте його у воду чи інші рідини. Тримайте його подалі від джерел води, крові, порушення згортання крові, тромбоцитопенічна пурпура, пляшки на шиї, варикозне розширення вен, венозний тромбоз, рак, пухлики та психічні розлади.
- Не торкайтеся до джерела живлення та не вимикайте/виймайте вилку для зарядки одразу після миття рук.
- Використовуйте та заряджайте виріб у середовищі з температурним діапазоном 0°C–40°C. Якщо пристрій не використовується протягом тривалого часу, зарядіть його перед використанням.

Обмеження або заборона використання людьми

Продукт підходить для щоденного використання в різних сценаріях, таких як домашнє або офісне використання. Однак неповнолітні та особи старше 60 років повинні використовувати

- Викидання батареї у вогонь або гарячу духовку, якщо має місце будь-яка з наведених нижче умов, проконсультуйтеся з хірургом або спеціалістом у лікарні третього рівня перед використанням і продовжуйте лише з дозволу та під наглядом:
- Люди, які постраждали від електромагнітних збоїв, наприклад, з кардіостимуляторами та імплантованими медичними електронними пристроями.
- Люди з сенсорними порушеннями, такими як температура та розлади сприйняття.
- Люди із захворюваннями серця.
- Особі з температурою тіла, що перевищує $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$.
- Вагітним і жінкам у післяпологовому періоді.
- Особі з ненормальними відчуттями кінцівок або труднощами з рухливістю через захворювання або вік.
- Люди з аномальними захворюваннями хребта, суглобів або скелета, включаючи остеопороз, шийний спонділоз і грижу диска поперекового відділу.
- Особі з ускладненнями внаслідок інших захворювань, таких як невралгія або пошкодження сітківки.

Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій

- Не ковтайте батарею. Небезпека хімічного опіку.
- Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей.
- Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть використовувати виріб і тримайте його подалі від дітей.
- Якщо ви вважаєте, що батареї могли проковтнути або помістити в будь-яку частину тіла, негайно зверніться до лікаря.
- Ризик вибуху, якщо батарею замінити на батарею невідповідного типу.
- Заміна на батарею невідповідного типу може порушити захист.

Ознайомлення з пристроєм

Деталі



- Насадка для масажу шиї
- Кнопка живлення
- Зарядний порт
- Ремінь

Список аксесуарів



Цільові користувачі

- Люди, які проводять довгі години перед комп'ютером.
- Особі, які тривалий час сидять.
- Ті, хто тривало зберігає однакову позу.
- Офісні працівники
- Особі, зайняті частою фізичною працею.


Зони масажу



Ілюстрації пристрою та аксесуарів у посібнику наведені лише для ознайомлення. Через оновлення фактичний вигляд може дещо відрізнятися, будь ласка, звертайте увагу на реальний вигляд пристрою.

Інструкція з експлуатації

1. Кнопки

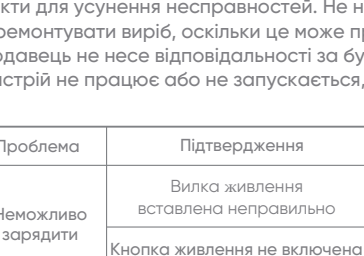

2. Як використовувати

- Щоб увімкнути або вимкнути пристрій, натисніть і утримуйте кнопку живлення приблизно 2 секунди.
- Режим запуску за замовчуванням включає [Стандартний режим масажу та режим інтенсивності першої передачі та режим нагріву].
- Під час зарядки індикатор буде відображати [червоний + блимаючий дисплей].
- Після завершення зарядки індикатор буде відображати [зелений + постійний дисплей].
- Виріб не можна використовувати під час зарядки. Якщо ввімкнути під час зарядки, пристрій автоматично припинить роботу.
- Коротко натисніть кнопку інтенсивності, щоб переключитися між режимами [Режим нагріву / Вимкнути нагрів]. Світловий індикатор залишається червоним, коли режим нагріву включений, і зеленим, коли він вимкнений.
- Коротко натисніть кнопку інтенсивності, щоб переключитися між [Друга передача інтенсивності/ Перша передача інтенсивності] режимами.

Розумний захист

Виріб має функцію розумного захисту. Щоб запобігти пошкодженню м'язів від тривалого розслаблення масажу, продукт автоматично вимикається через 10 хвилин безперервного використання.

Вирішення проблем

Якщо під час використання виникають проблеми, перевірте наступні пункти для усунення несправностей. Не намагайтеся розібрати або відремонтувати виріб, оскільки це може призвести до пошкодження, і продавець не несе відповідальності за будь-які наслідки. Якщо пристрій не працює або не запускається, перевірте наступне:

Проблема	Підтвердження	Рішення
Неможливо зарядити	Вилка живлення вставлена неправильно Кнопка живлення не включена	Переконайтеся, що вилка надійно вставлена Увімкніть кнопку живлення
Пристрій не працює	Пристрій автоматично вимикається через 10 хвилин масажу	Якщо ви хочете зробити масаж знову, знову натисніть кнопку живлення приблизно на 2 секунди
Неможливо вклучити	Немає живлення або низький заряд батареї	Зарядіть пристрій перед використанням

Якщо наведені вище способи не допомогли вирішити проблему, зверніться до офіційної служби підтримки клієнтів для отримання технічної підтримки.

Інструкції з техніки безпеки

- Не намагайтеся ремонтувати, розбирати або модифікувати виріб. Якщо виріб пошкоджено, не використовуйте його та негайно зверніться до офіційної служби підтримки клієнтів.
- Цей продукт виділяє тепло, користувачам, чутливим до тепла, не слід ним користуватися.

Застереження

- Перший раз починаючи використовувати цей продукт, почніть з найслабшої функції, дотримуйтесь особистої терпимості та поступово збільшуйте передачу та перемикайте режими для комфортного масажу.
- Через відмінності в індивідуальній переносимості інтенсивності масажу після тривалого використання може з'явитися легке почервоніння або тепло в зоні масажу, що є нормальним явищем після масажу.

3. Зарядка

- Виріб має вбудований високопродуктивний літєвий акумулятор ємністю 2000 мАГ для функції масажу та нагріву.
- Виріб має вбудований зарядний порт Type-C. Під'єднайте його за допомогою зарядного шнура та адаптера живлення, щоб розпочати зарядку.
- Під час зарядки індикатор буде відображати [червоний + блимаючий дисплей].
- Після завершення зарядки індикатор буде відображати [зелений + постійний дисплей].
- Виріб не можна використовувати під час зарядки. Якщо ввімкнути під час зарядки, пристрій автоматично припинить роботу.
- Коли батарея розряджається, індикатор блимає протягом 5 секунд, а потім автоматично вимикається через 10 хвилин зарядіть пристрій перед використанням.


Технічні характеристики

Назва продукту: Масажер для шиї Yunmai
Вага нетто: приблизно 1,2 кг
Номінальна вхідна напруга: 5 В=2 А
Розміри виробу: 1250 x 150 x 160 мм
Модель продукту: YM8241
Ємність акумулятора: 2000 мАГ
Потужність двигуна: 30 Вт
Спосіб зарядки: зарядка типу C.
Робоча температура: 0°C–40°C
Робоча вологість: 20% ~ 80%
Температура зберігання: -10°C–40°C
Вологість при зберіганні: 20% ~ 80%


Технічне обслуговування

Очищення та технічне обслуговування

- Регулярно чистіть виріб чистим м'яким рушником. Перед початком процесу очищення переконайтеся, що виріб вимкнено, і від'єднайте штепсель від зарядного пристрою.
- Уникайте використання вологих рушників для протирання виробу та його поверхонь.
- Утримуйтеся від полоскання виробу водою або розміщення його в пральній машині для чищення.
- Не використовуйте корозійні засоби для чищення цього продукту.
- Переконайтеся, що виріб повністю сухий після чищення.

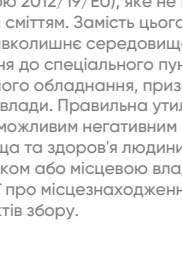

Переробка

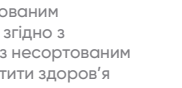

Усі продукти, позначені цим символом, є відпрацьованим електричним та електронним обладнанням (WEEE згідно з Директивою 2012/19/EU), яке не можна змішувати з несортованим побутовим сміттям. Замість цього ви повинні захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, здавши відпрацьоване обладнання до спеціального пункту збору відходів електричного та електронного обладнання, призначеного урядом або місцевими органами влади. Правильно утилізація та переробка допоможе запобігти можливим негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Будь ласка, зв'яжіться з установником або місцевою владою для отримання додаткової інформації про місцезнаходження, а також умови та положення таких пунктів збору.

Директива щодо акумуляторів – інформація для користувачів



У Європейському Союзі ця етикетка вказує на те, що батареї в цьому продукті слід збирати окремо та не викидати разом із побутовими відходами. Речовини в батареях можуть мати потенційний негативний вплив на здоров'я та навколишнє середовище, і ви маєте певну роль у переробці відпрацьованих батарейок, таким чином сприяючи захисту, збереженню та покращенню якості довкілля. Зверніться до місцевих органів влади або роздрібного продавця, щоб дізнатися більше про схеми збору та переробки.

Декларація відповідності ЄС

Ми, компанія Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає чинним директивам, європейським нормам і стандартам. Повний текст декларації про відповідність ЄС доступний за такою адресою в Інтернеті: www.yunmaiglobal.com



Не викидайте цей електричний акумулятор в загальнодомашнє сміття. Будь ласка, поверніть цей електричний акумулятор в пункт прийому вторинної сировини.



Виготовлено в Китаї

Більше інформації
Відвідайте <https://www.yunmaiglobal.com>
Електронна адреса: support@yunmai.com
Instagram: [yunmaiglobal](https://www.instagram.com/yunmaiglobal)
Facebook: Yunmai
Адреса: кімната 01, 18-19 / F, будівля штаб-квартири
Chiwai, Zhaoshang Street, Nanshan District, Shenzhen
518000 Гуандун
КНР Китай

⚠ Инструкции по технике безопасности

⚠ Предупреждения

Запреты

- Запрещается использовать устройство на участках с меньшим мышечным покрытием, таких как голова, лицо, локти, колени и другие суставы с минимальной защитой мышц.
- Запрещается использовать на плотных нервах и кровеносных сосудах и уязвимых участках, таких как подмышки, внутренняя сторона рук, внутренняя сторона ключиц, внутренняя сторона локтевых суставов, задняя сторона коленных ямок и гениталии.
- Запрещается использовать на участках с кровоподтеками, болью в теле, поверхностными ранами, местным повышением температуры, покраснением, дискомфортом, острым воспалением, спазмами, разрывами мышц, острыми растяжениями, кровоподтеками и растяжениями.
- Если после интенсивных тренировок возникают такие симптомы, как общая лихорадка, тошнота, рвота, мышечная боль и слабость, немедленно прекратите использование и обратитесь к врачу.
- Запрещается использовать продукт с такими заболеваниями: сердечно-сосудистые заболевания, заболевания крови, нарушения свертывания крови, тромбоцитопеническая пурпура, бляшки на шее, варикозное расширение вен, венозный тромбоз, рак, опухоли и психические расстройства.
- Запрещается использовать во время вождения.
- Запрещается использование при неблагоприятных погодных условиях, таких как дождь, снег, грозы, песчаные бури, тайфуны и т.д.
- Запрещено использование в закрытых помещениях с высокой концентрацией газа (например, дезинфицирующие средства, кислородные камеры высокого давления).
- Этот продукт может помочь снять стресс, усталость и боль в мышцах, но не может заменить профессиональное медицинское оборудование, не имеет эффекта снижения веса, не может

вылечить какие-либо болезни и не может решить медицинские проблемы. Никакие претензии не будут рассматриваться в отношении несчастных случаев, вызванных неправильным использованием.

⚠ Предостережение

Меры предосторожности

- Не подключайте изделие к источнику питания для зарядки, если оно находится без присмотра или используется. После завершения зарядки отсоедините зарядное устройство от устройства вовремя.
- Не используйте изделие под покрытием (например, одеялами, подушками и т.п.). Это может повлиять на рассеивание тепла продукта и вызвать его перегрев, что приведет к повреждению, короткому замыканию, пожару, поражению электрическим током и другим опасным травмам.
- Не вставляйте и не блокируйте зарядный порт или открытые отверстия какими-либо предметами, так как это может привести к неправильному использованию или повреждению изделия. Держите устройство в чистоте.
- Не используйте изделие во влажной среде и не погружайте его в воду или в другие жидкости. Во избежание воздействия на производительность аккумулятора держите его подальше от источников воды, источников тепла и коррозионных сред.
- Не прикасайтесь к источнику питания и не выключайте/вынимайте вилку для зарядки сразу после мытья рук.
- Используйте и заряжайте изделие с температурой 0°C~40°C. Если устройство не используется в течение длительного времени, зарядите его перед использованием.

Ограничение или запрет использования людьми

Продукт подходит для повседневного использования в различных сценариях, таких как домашнее или офисное использование. Однако несовершеннолетние и лица старше 60 лет должны

Если имеется любое из следующих условий, проконсультируйтесь с хирургом или специалистом в больнице третьего уровня перед использованием и продолжайте только с разрешения и под наблюдением:

- Люди, пострадавшие от электромагнитных сбоев, например с кардиостимуляторами и имплантированными медицинскими электронными устройствами.
- Люди с сенсорными нарушениями, такими как температура и расстройства восприятия.
- Людям с заболеваниями сердца.
- Лица с температурой тела выше $\geq 37,3^{\circ}\text{C}$.
- Беременным и женщинам в послеродовом периоде.
- Лица с ненормальными ощущениями конечностей или трудностями с подвижностью из-за заболевания или возраста.
- Люди с аномальными заболеваниями позвоночника, суставов или скелета, включая остеопороз, шейный спондилез и грыжу диска поясничного отдела.
- Лица с осложнениями вследствие других заболеваний, таких как невропатия или повреждение сетчатки.

Утилизируйте использованные батареи в соответствии с инструкциями

- Не проглатывайте батарею. Опасность химического ожога.
- Держите новые и использованные батареи вдали от детей.
- Если батарейный отсек не закрывается надежно, перестаньте использовать изделие и держите его подальше от детей.
- Если вы считаете, что батареи могли проглотить или поместить в любую часть тела, немедленно обратитесь к врачу.
- Риск взрыва, если заменить батарею на батарею неподходящего типа.
- Замена батареи несоответствующего типа может нарушить защиту.

Знакомство с устройством

Подробности



Список аксессуаров



Целевые пользователи

1. Люди, проводящие долгие часы перед компьютером.
2. Лица, длительно сидящие.
3. Те, кто длительно сохраняет одинаковую позу.
4. Офисные работники
5. Лица, занятые частым физическим трудом.


Massage Areas



Иллюстрации устройства и аксессуаров в руководстве приведены только для ознакомления. Из-за обновления фактический вид может несколько отличаться, пожалуйста, обращайте внимание на реальный вид устройства.

Руководство по эксплуатации

1. Кнопки

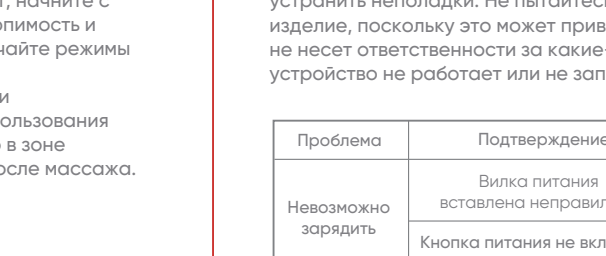

2. Как использовать

- Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 2 секунды.
- Режим по умолчанию включает [Стандартный режим массажа и режим интенсивности первой передачи и режим нагрева].
- Кратко нажмите кнопку «Режим», чтобы переключаться между [Медленным массажем / Стандартным массажем] режимами.
- Кратко нажмите кнопку нагрева, чтобы переключаться между режимами [Режим нагрева/Выключить нагрев]. Световой индикатор остается красным, когда режим нагрева включен, и зеленым, когда он выключен.
- Кратко нажмите кнопку интенсивности, чтобы переключаться между [Вторая передача интенсивности/Первая передача интенсивности] режимами.

Умная защита

Изделие имеет функцию умной защиты. Чтобы предотвратить повреждение мышц от длительного расслабления массажа, продукт автоматически выключается через 10 минут непрерывного использования.

Решение проблем

Если возникают проблемы, проверьте следующие пункты, чтобы устранить неполадки. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать изделие, поскольку это может привести к повреждению, и продавец не несет ответственности за какие-либо последствия. Если устройство не работает или не запускается, проверьте следующее:

Проблема	Подтверждение	Решение
Невозможно зарядить	Вилка питания вставлена неправильно	Убедитесь, что вилка надежно вставлена
	Кнопка питания не включена	Включите кнопку питания
Устройство не работает	Устройство автоматически выключается через 10 минут массажа.	Если вы хотите сделать массаж снова, снова нажмите кнопку питания примерно на 2 секунды
Невозможн о включить	Нет питания или низкий заряд батареи	Перед использованием зарядите устройство


Если приведенные выше способы не помогли устранить проблему, обратитесь в официальную службу поддержки клиентов для получения технической поддержки.

Инструкции по технике безопасности

- Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать изделие. Если устройство повреждено, не используйте его и немедленно обратитесь в официальную службу поддержки клиентов.
- Этот продукт выделяет тепло, не пользуясь пользователем, чувствительным к теплу.

Руководство по эксплуатации

1. Кнопки

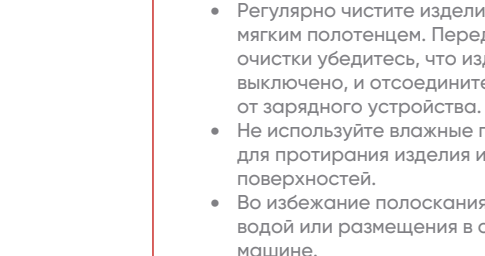

2. Как использовать

- Чтобы включить или выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания примерно 2 секунды.
- Режим по умолчанию включает [Стандартный режим массажа и режим интенсивности первой передачи и режим нагрева].
- Кратко нажмите кнопку «Режим», чтобы переключаться между [Медленным массажем / Стандартным массажем] режимами.
- Кратко нажмите кнопку нагрева, чтобы переключаться между режимами [Режим нагрева/Выключить нагрев]. Световой индикатор остается красным, когда режим нагрева включен, и зеленым, когда он выключен.
- Кратко нажмите кнопку интенсивности, чтобы переключаться между [Вторая передача интенсивности/Первая передача интенсивности] режимами.

Умная защита

Изделие имеет функцию умной защиты. Чтобы предотвратить повреждение мышц от длительного расслабления массажа, продукт автоматически выключается через 10 минут непрерывного использования.

Решение проблем

Если возникают проблемы, проверьте следующие пункты, чтобы устранить неполадки. Не пытайтесь разобрать или отремонтировать изделие, поскольку это может привести к повреждению, и продавец не несет ответственности за какие-либо последствия. Если устройство не работает или не запускается, проверьте следующее:

Проблема	Подтверждение	Решение
Невозможно зарядить	Вилка питания вставлена неправильно	Убедитесь, что вилка надежно вставлена
	Кнопка питания не включена	Включите кнопку питания
Устройство не работает	Устройство автоматически выключается через 10 минут массажа.	Если вы хотите сделать массаж снова, снова нажмите кнопку питания примерно на 2 секунды
Невозможн о включить	Нет питания или низкий заряд батареи	Перед использованием зарядите устройство

Если приведенные выше способы не помогли устранить проблему, обратитесь в официальную службу поддержки клиентов для получения технической поддержки.

Инструкции по технике безопасности

- Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или модифицировать изделие. Если устройство повреждено, не используйте его и немедленно обратитесь в официальную службу поддержки клиентов.
- Этот продукт выделяет тепло, не пользуясь пользователем, чувствительным к теплу.

Техническое обслуживание

Очистка и техническое обслуживание

- Регулярно чистите изделие чистым мягким полотенцем. Перед началом очистки убедитесь, что изделие выключено, и отсоедините штепсель от зарядного устройства.
- Не используйте влажные полотенца для протирания изделия и его поверхностей.
- Во избежание полоскания изделия водой или размещения в стиральной машине.
- Не используйте коррозионные чистящие средства.
- Убедитесь, что изделие полностью сухое после чистки.



Переработка

Все продукты, отмеченные этим символом, являются отработанным электрическим и электронным оборудованием (WEEE согласно Директиве 2012/19/EU), которое нельзя смешивать с несортированным бытовым мусором. Вместо этого вы должны защитить здоровье людей и окружающую среду, сдав отработанное оборудование в специальный пункт сбора отходов электрического и электронного оборудования, назначенного правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Пожалуйста, свяжитесь с установщиком или местными властями для получения дополнительной информации о местонахождении, а также условий и положений таких пунктов сбора.



Директива по аккумуляторам – информация для пользователей


В Европейском Союзе этикетка указывает на то, что батареи в этом продукте следует собирать отдельно и не выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Вещества в батареях могут иметь потенциальное негативное воздействие на здоровье и окружающую среду, и вы играете определенную роль в переработке отработанных батареек, таким образом способствуя защите, сохранению и улучшению качества окружающей среды. Обратитесь к местным органам власти или розничному продавцу, чтобы узнать больше о схемах сбора и переработки.

Декларация соответствия ЕС

Мы, компания Shenzhen Yunmai Technology Co., Ltd, заявляем, что это оборудование соответствует действующим директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по такому адресу в Интернете: www.yunmaiglobal.com



Не выбрасывайте литий-ионные аккумуляторы с обычным мусором. Пожалуйста, верните литий-ионный Li-Ion аккумулятор в пункт приема вторсырья.

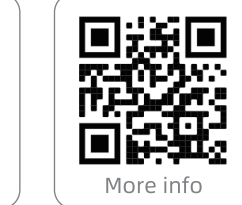

Больше информации

Посетите <https://www.yunmaiglobal.com>
E-mail: support@iyunmai.com
Instagram: [yunmaiglobal](https://www.instagram.com/yunmaiglobal)
Facebook: Yunmai
Адрес: комната 01, 18-19/F, здание штаб-квартиры
Chiwan, Zhongshang Street, Nanshan District, Shenzhen
518000 Гуандун
Китай

